


# Turbo Slim®

## GUIA RÁPIDO - PROCEDIMENTOS DE USO


1) a) Conecte o cabo de força no TurboSlim.

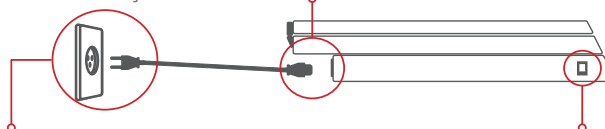

b) Conecte o equipamento na rede elétrica


c) Ligue a chave

2)



Ajuste a temperatura e o tempo desejado para realizar a termocolagem das palmilhas.

3)



Pressione o Botão de Acionamento.  
Espere até que a temperatura atinja a temperatura programada.

 Para interromper, pressione novamente. 


4)




**ALERTA  
2 BIPES**


Dois bipes de alerta indicam o fim desta etapa.

5)




Insira os materiais componentes da palmilha no interior da câmara de vácuo do Turbo Slim e pressione o Botão de Acionamento. 

6)



Pressione a tampa do seu Turbo Slim para que o vácuo realize o fechamento.


7)



Espere o tempo programado para a execução do processo de termocolagem.

 Para interromper, pressione novamente. 

8)



**ALERTA  
3 BIPES**

**PROCESSO FINALIZADO!**

## CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Não conecte itens que não são especificados como parte do sistema deste produto;
- Não derrube ou coloque peso sobre as peças deste equipamento;
- Não desmonte ou remonte nenhuma das peças deste equipamento;



**ATENÇÃO:** Não abra o equipamento e/ou tente consertá-lo. Isto pode agravar o problema e implicará na perda da garantia.

- Não aqueça nenhuma das peças acima dos valores máximos especificados neste manual;
- Não obstrua a saída de ar.

## LIMPEZA

Para a boa conservação do equipamento, recomendamos os seguintes procedimentos para limpeza:

- Utilize pano umedecido com água e sabão ou detergente neutro.
- Após a limpeza, deixe o equipamento secar por alguns minutos.
- Não utilize produtos à base de cloro ou solventes.



**ATENÇÃO:** O produto não pode ser mergulhado em líquidos.